



スペースセービングチャート

SSC-370 TypeD



THE ART OF EYE CARE

設置距離90cmで、検査距離5mと同等の検眼を実現した省スペース視力表です。ご好評いただいているSSCシリーズがさらに使いやすくなりました。

スムーズな視標切り替え

視標の切り替え時間が1.5倍早くなり^{*1}、よりストレスを感じることなく検眼をおこなうことができます。
*1 SSC-350比


使いやすいスマートリモコン

手持ちでも卓上でも使えるサイズ。ボタンの配置も使いやすく変更しました。また、本体とリモコンの双方向の通信機能により、視標とリモコンの表示内容を常に一致させます。



アイレベル自動調整

検査前の視標位置調整は、スマートリモコンで簡単に調整可能です。被検者の目の高さでアイレベルボタンを押すことにより、視標を適した高さに自動で調整します。視認範囲は40cm(上下20cm)とさらに可動範囲が広がりました。

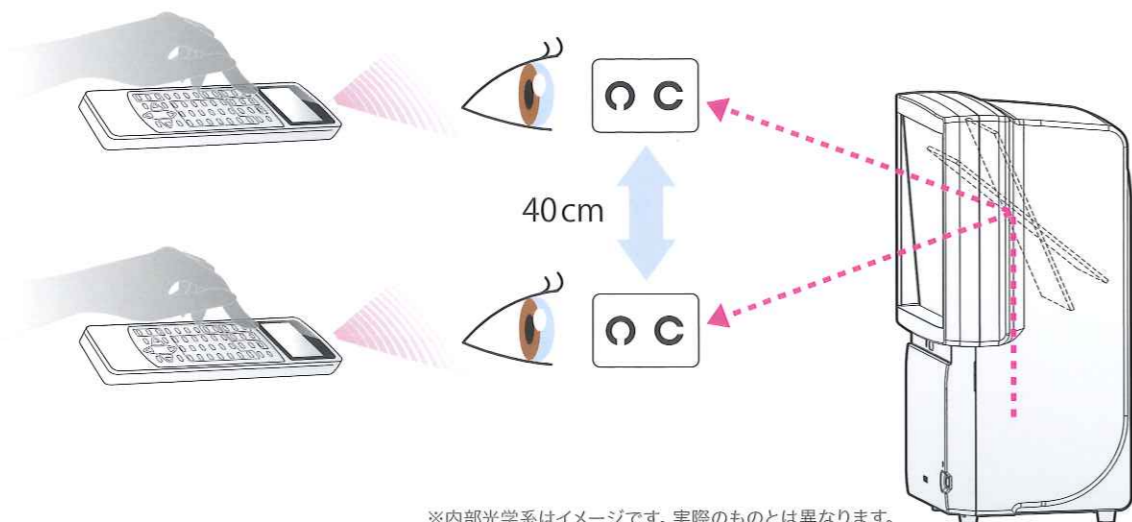

※内部光学系はイメージです。実際のものとは異なります。

スペースセービング

内蔵の光学系により視標窓の奥に視標が呈示されます。コンタクトルームなど、5m検査距離の確保が難しい場所でも設置が可能になります。また、入射する日光などの検査環境変動要因に左右されにくい、安定した視標呈示がおこなえます。

夜間の見づらさを訴える患者様に

輝度を下げた視標を呈示(暗室への設置が効果的)




通常呈示

夜間想定呈示

豊富な視標

視標種類

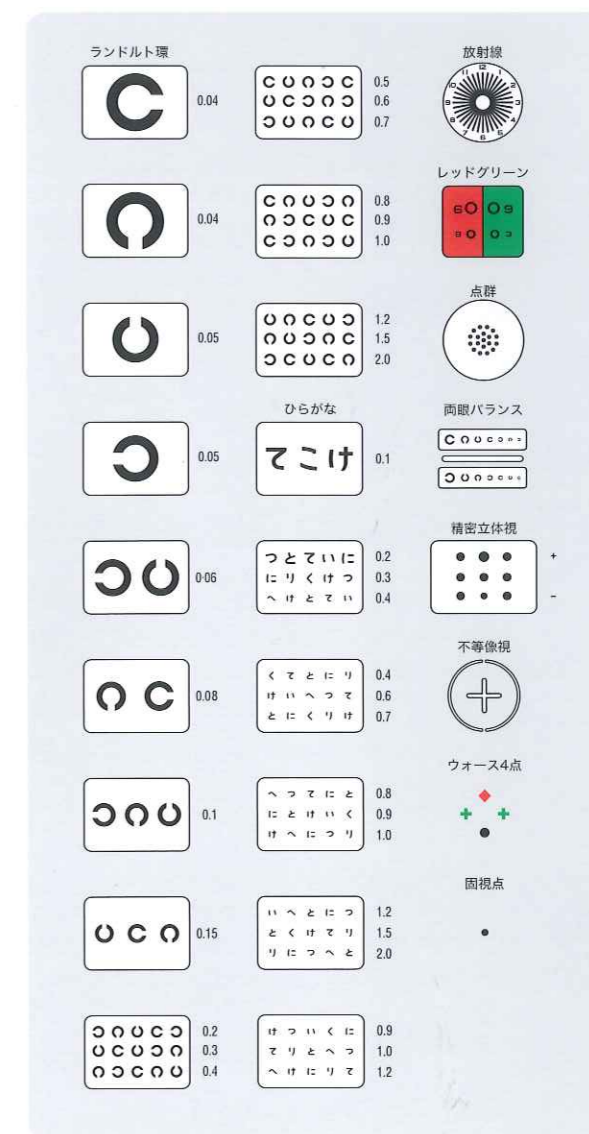

マスク機能(ランドルト環・ひらがな)



SSC-370 TypeD の配置例

メンテナンスフリー LED

視標背景照明に高輝度LEDを採用し、ランプ交換の手間をなくしました。

仕様

検査視標	26種類(Dチャート)
検査距離	5m(設置距離0.9m)
マスク機能	一文字、横一列、縦一列(5列視標の縦マスクは両端、中央の3列)
フィルター機能	赤緑フィルター
視標切り替え時間	0.3秒以下
視標窓サイズ	338(W)×258(H)mm
視認位置範囲	被検者位置での可動ストローク400mm(上下200mm)
オートオフ機能	15分、5分、機能OFF
ブザー音量調整	大、小、OFF
電源仕様	AC100V、50/60Hz 60VA
外形寸法	本体 396(W)×268(D)×560(H)mm
質量	18.5kg リモコン 68(W)×228(D)×22.5(H)mm 0.2kg(電池、ストラップ含む)
商品構成	本体 1台 取扱説明書 1冊 視標シート 1枚 偏光メガネ 1個 手持ち視標 1セット(3枚) 電源コード 1本 ダストカバー 1枚
オプション構成	リモコン 自動検眼システム用通信ケーブル レッドグリーンメガネ 専用搭載台(スタンド) 専用テーブル(長テーブル) トライアルレンズ

オプション

スタンド



長テーブル




トライアルレンズ(写真はレンズトレイ枠付)



販売名：スペースセービングチャート SSC-370

機器分類：一般医療機器

届出番号：23B1X00023000142

 Eye & Health Care
株式会社 ニデック



注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「添付文書」及び「取扱説明書」をよくお読みください。

※性能改善のため外観及び仕様は予告なしに変更されることがあります。
※カタログと実際の商品の色は印刷の関係上多少異なる場合があります。

札幌支店 〒065-0023 札幌市東区北23条東4-5-17
仙台支店 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-8-16
埼玉支店 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町4-783-1
東京支店 〒113-0033 東京都文京区本郷3-22-5 住友不動産本郷ビル
横浜支店 〒224-0001 横浜市都筑区中川7-1-14
蒲郡支店 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34-14
URL <http://www.nidek.co.jp>

☎(011)731-4001
☎(022)238-1338
☎(048)640-2280
☎(03)5844-2631
☎(045)913-6200
☎(0533)67-8260

金沢支店 〒920-0342 金沢市畷田西1-106
京都支店 〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町234
大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー
高松支店 〒761-8064 高松市上之町3-4-17 神原商事第一ビル
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町2-12-3 広機ビル
福岡支店 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4-4-3

☎(076)268-8951
☎(075)645-1161
☎(06)6838-0030
☎(087)868-0531
☎(082)295-3581
☎(092)574-4511



このカタログは環境対応インキを使用しております。

製造販売元 株式会社ニデック
〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14
☎(0533)67-6151(代)

Printed in Japan SSC-370D ②