

## 前眼部OCT

# CASIA<sup>®</sup> 2 Advance



より広く、より深く、より美しくと  
進化してきたCASIA2  
そして今、Advance…  
一つの到達点がここにあります。

診療の用途に合わせ、各種セットをご用意しました。

### エキスパートセット

- 白内障手術、緑内障治療、角膜疾患、屈折矯正術をサポートする解析アプリケーション全てを網羅したセットです。前眼部OCTをフルに活用可能な構成となっています。

### 白内障セット


- 白内障向けアプリケーションCICS(キックス)を中心に、白内障術前・術後の総合的な評価が可能な解析アプリケーションを搭載したセットです。



CICS:術前IOLスクリーニング

### 角膜形状解析セット

- 角膜前後面の形状解析をメインに解析アプリケーションを搭載したセットです。角膜混濁の影響を受けにくい前眼部OCT像で高精度な解析が行えます。

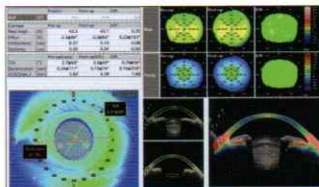

CICS:術後IOL傾斜・偏心評価

### 緑内障セット

- 角膜トポグラファーを既に所有されているご施設様には、隅角閉塞や緑内障手術の評価をメインに解析アプリケーションを搭載した緑内障セットをお求め可能です。



CASIA2とOA-2000連携

### OA-2000との連携

- 別売の光学式眼軸長測定装置OA-2000と連携すれば、CASIA2でプレミアムIOLを含めた度数計算や各種計算式の比較が可能です。



### 主な仕様

解像度	軸方向	10μm以下(組織内)
	横断面	30μm以下(空気中)
スキャン範囲	軸方向	13mm(空気中)
	横断面	ラジアル:φ16mm(空気中) ラスター:12mm×12mm
スキャンレート		1秒当たり50,000A-スキャン
光源の種類		波長走査光源
波長		1310nm
出力		6mW以下
レーザクラス (IEC60825-1:2007)		クラス1
消費電力		170VA
寸法	本体	530(W)×560(D)×455(H)mm
	光学台	700(W)×500(D)×600~800(H)mm

◎「CASIA」は(株)トーメーコーポレーションの登録商標です。

		価格(税抜)
価 格	CASIA2 Advanceエキスパートセット(CASIA2本体、エキスパートセット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム)	¥18,300,000
	CASIA2 Advance白内障セット(CASIA2本体、白内障セット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム)	¥15,800,000
	CASIA2 Advance角膜形状解析セット(CASIA2本体、角膜形状解析セット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム)	¥14,800,000
	CASIA2 Advance緑内障セット(CASIA2本体、緑内障セット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム)	¥14,800,000
	CASIA2 Advanceエキスパートセットサービスパック・4年 (CASIA2本体、エキスパートセット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム、4年保証延長サービス)	¥18,900,000
	CASIA2 Advanceエキスパートセットサービスパック・単年 (CASIA2本体、エキスパートセット、CASIA2用外付けHDD、電動光学台、アーム、単年保証延長サービス)	¥18,500,000
	オプション	CASIA2用トータル解析ライセンスキー
汎用レーザープリンター3		¥85,000
プリンタースタンド		¥30,000
IOLパワー計算ソフトウェア・オクリクス		¥300,000
CASIA2用外付けHDD		¥180,000
付属品:消耗品 アゴ紙		¥3,000
	CASIA2診察室ビューアー	¥150,000
	CASIA2診察室ビューアー用デスクトップPC	¥250,000
	4年保証延長サービス	¥600,000
	単年保証延長サービス	¥200,000
	アゴピン(2本1組)	¥400