



CR-750

CR-750S

Motorized Patient Chair

CR-750 CR-750S

S e r v i n g y o u r v i s i o n





豊富なシートカラーバリエーション

ブルー、ピンク、グリーンの標準色のシートカラーバリエーションの中から
お好みの色をお選び下さい。

※その他、これ以外の幅広いオーダーに対応いたします。
価格、納期等につきましては弊社までお問合せ下さい。



ピンク

ブルー

グリーン

業界初の最低高さ400mmを達成*

従来の電動患者椅子よりも最低高さを30mm下げ、最低高さ400mmを
達成いたしました。更に昇降ストロークを150mmにしたことで、大きな患
者様から小さな患者様まで十分に対応できる電動患者椅子になりました。

*当社調べ

本体に標準装備のUP/DOWNスイッチ

新たに標準装備された本体背面のUP/DOWNスイッチでも椅子の上下が
できるようになりました。これにより、スタッフ側からでも椅子の上下が簡
単にできるようになりました。



CR-750Sは フットスイッチ不要のシステムタイプ

スマートテーブルのボタン操作で椅子の上下が可能です。フットスイッチ
が無いので、足元の安全性が向上します。また、電力供給・上下動の伝
達は1本のケーブルにて確実にを行うため、充電や反応の悪さの心配はあり
ません。

CR-750Sはスマートテーブルのほかに、オフサルミックワークステーシ
ョン、オートデスク、電動光學台と接続することが可能です。

※接続可能な製品につきましては、お使いの製品の製造番号を確認の上、弊社営
業までお問合せ下さい。

スライド機構 (工場オプション)

スライドブラケットを装着することにより、椅子に座ったままシートが前方
へ60mm移動可能です。椅子自体を動かすことなく被検者は検査器械に
近づき検査を受けることができます。

※スライドブラケットは工場オプションですのでユニット単体での販売はできません。


丸シート (特注仕様)

標準シート (角型シート)のほかに丸シートも特注にて承ります。4ヶ所の
ネジで簡単に取付ができます。ご希望に応じてお問い合わせください。

仕様

| | |
|---------|--------------------|
| 昇降ストローク | 150mm |
| 許容荷重 | 150kg以下 |
| 入力電源 | AC100-230V 50/60Hz |
| 消費電力 | 120VA |
| 重量 | 26.5kg (CR-750) |
| | 25kg (CR-750S) |

寸法図

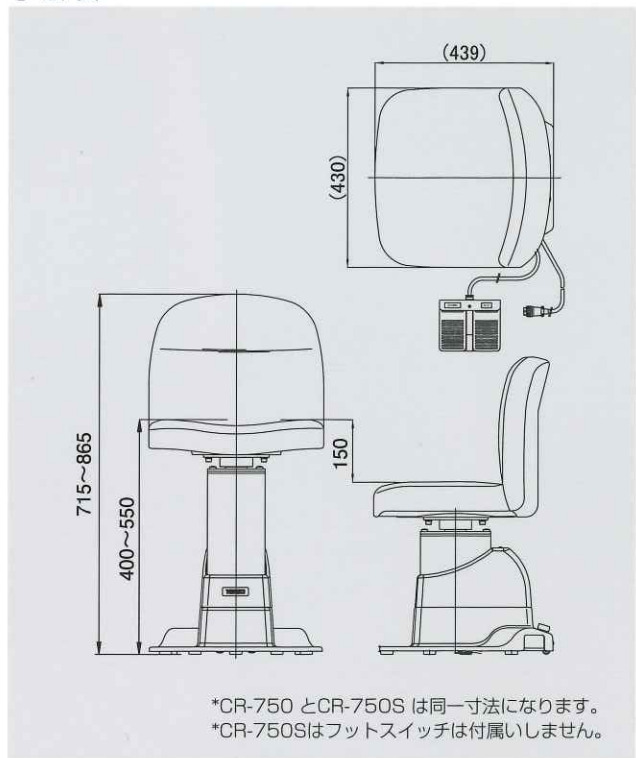

●製品向上のためデザイン、仕様が多カタログと異なることがあります。

機械器具01 手術台及び治療台 15723000 眼科診療・処置用椅子 一般医療機器



本 社 〒383-8585 長野県中野市岩船330-2
TEL.(0269)22-4512 FAX.(0269)26-6321
大阪営業所 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町3-24-5
TEL.(06)6334-4512 FAX.(06)6334-4521
<http://www.takagi-j.com>

CR-750 届出番号 20B2X00012000056
CR-750S 届出番号 20B2X00012000057